


# Antigen-Selbsttests für Schülerinnen und Schüler

Nur 2 Zentimeter tief in der eigenen Nase drehen!  
Kurz und schmerzlos! Ergebnis in 15 Minuten!

Was braucht man dazu?



Testkarte

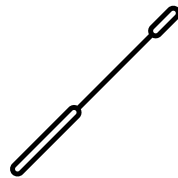



Stäbchen mit Tupfer



Lösung




Wie funktioniert's?

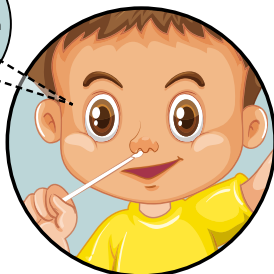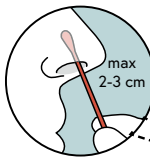


## Schritt 1:

- Tupfer **NUR 2 Zentimeter** in die Nasenhöhle stecken
- Tupfer 5 Mal im Kreis drehen
- Nasenhöhle wechseln, Drehen wiederholen

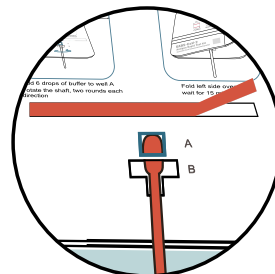


## Schritt 2:

- Schutzabdeckung des Klebestreifens entfernen und Probe in die Öffnung schieben

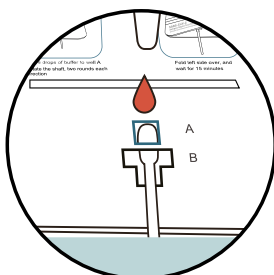

## Schritt 3:

- 6 Tropfen der Lösung in die Vertiefung geben und Tupfer 2 Mal in jede Richtung drehen

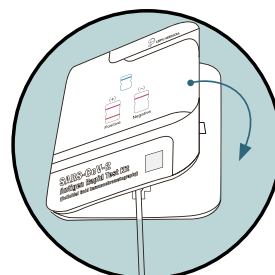

## Schritt 4:

- Linke und rechte Seite zusammenkleben
- Testergebnis erscheint in 15 Minuten



## Schritt 5:

- Testergebnis positiv:  
zu Hause: 1450 kontaktieren  
in der Schule: Schulleitung informiert 1450  
oder die örtliche Gesundheitsbehörde
- Test negativ:  
Gesund bleiben und weiter die Schule besuchen